

Baxter

Infusor

AMBULATORY SYSTEMS

Infusor

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ



バクスターインフューザー、インターメイトは、
合成ゴムから作られたバルーン式薬液リザーバーと、
流量を制御する管から出来た携帯型ディスプレイ注入ポンプです。

製品特長

優れた携帯性

小型かつ軽量のため、患者さんの行動・日常生活を制限しません。

目立たない

バルーンリザーバーの収縮で駆動するため、駆動音や警告音がありません。

不正使用の防止

投与される薬液量は、製品の選択と薬液の濃度によって調節されます。一度充填された薬剤は製品から取り出す事ができません。

シンプル


点滴ポールや電源コードの必要がありません。又、流速は流量制御管の内径の違いによって設定されていますので、プログラミングの必要もありません。流速および充填量の異なる製品群より、治療方針に合わせた選択が可能です。

安定した流速

投与開始から終了まで全注入時間として公称流量±10%の精度で持続的に薬液を流出するように設計されています。



■LV5 (5mL/hr) の流速推移 (5%ブドウ糖注射液 3.1℃ 設定)

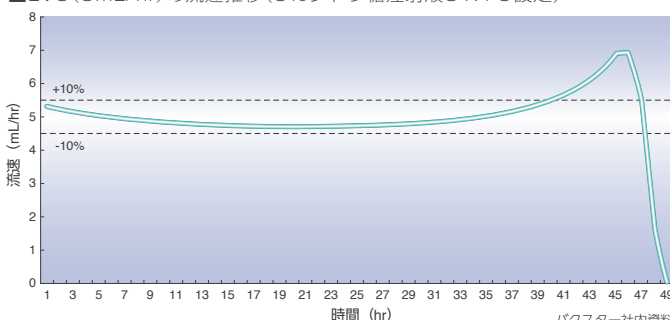

バクスター社内資料

バクスターインフューザー SVシリーズ (ボトルタイプ) ・LVシリーズ

承認番号：16300BZY00986000
高度管理医療機器 (クラスⅢ) 加圧式医薬品注入器

コード番号	製品名	規定充填量	残液量	公称流量	規定注入時間	公称充填量 (最大充填量)	最小充填量	包装単位
J2C1701	バクスターインフューザー SV1	96mL	約 1mL	1mL/hr	96時間	97mL	86mL	12個
J2C1702	バクスターインフューザー SV2	96mL	約 1mL	2mL/hr	48時間	97mL	86mL	12個
J2C1711	バクスターインフューザー SV2.5	120mL	約 1mL	2.5mL/hr	2日	130mL	108mL	12個
J2C1008	バクスターインフューザー LV2	240mL	約 3mL	2mL/hr	120時間	300mL	216mL	12個
J2C1009	バクスターインフューザー LV5	240mL	約 3mL	5mL/hr	48時間	300mL	216mL	12個
J2C1063	バクスターインフューザー LV10	240mL	約 3mL	10mL/hr	24時間	300mL	216mL	12個

インターメイト

承認番号：20600BZY00035000
高度管理医療機器 (クラスⅢ) 加圧式医薬品注入器

コード番号	製品名	規定充填量	残液量	公称流量	規定注入時間	公称充填量 (最大充填量)	最小充填量	包装単位
2C2112K	インターメイト LV50	250mL	約 3mL	50mL/hr	5時間	275mL	225mL	24個

附属品



携帯用メッシュポーチ

(製品梱包とは別に用意しております)



(SV用)



(LV用)

携帯用ポーチ

(製品梱包とは別に用意しております)

製造販売元

バクスター・ジャパン株式会社

東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー30階

www.baxter.co.jp

問い合わせ先

バクスター・ジャパン株式会社

ホスピタルプロダクト事業部

電話番号：03-4567-1400

2024年1月作成
JP-MD16-230019_v1